


ONDA PLUS

L'evoluzione del body
countoring con le Coolwaves®



 **RENAISSANCE®**
The laser excellence

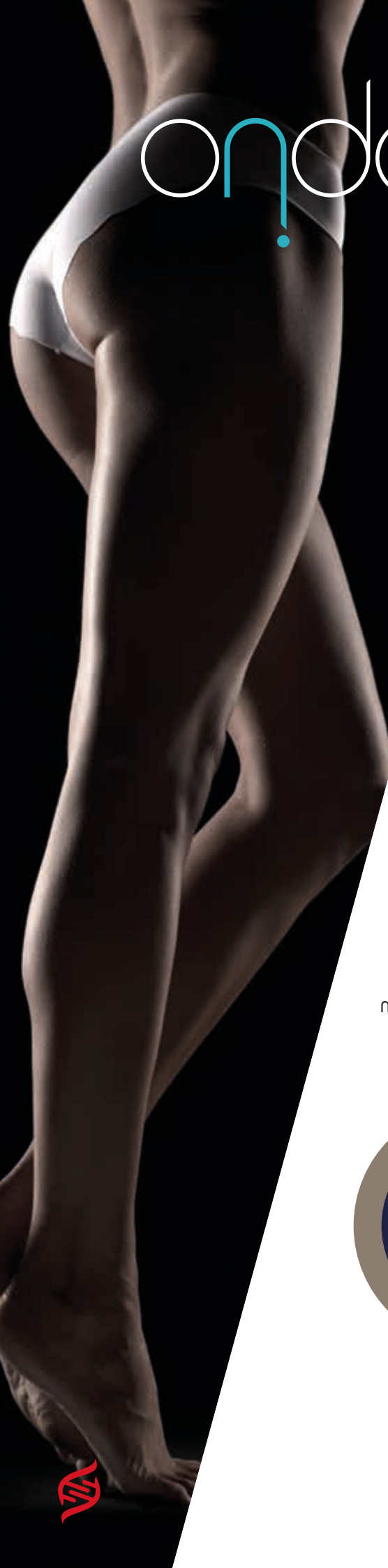

onda
plus

L'onda che rimodella la silhouette

Onda PLUS utilizza le Coolwaves®, particolari microonde selettive e confinate che agiscono in modo sicuro su cellulite, adiposità e lassità cutanea.

La metodica non invasiva è ancora più confortevole con l'azione del manipolo Plus che ottimizza l'azione delle Coolwaves®.

L'evoluzione della rivoluzione

Onda PLUS è la perfetta sinergia tra esperienza medica ed evoluzione tecnologica. Il performante sistema di raffreddamento integrato e la guida led con segnale acustico permettono di monitorare il corretto posizionamento dei manipoli Deep e Shallow, riducendo al minimo il rischio di effetti collaterali indesiderati ed esaltandone la facilità di utilizzo e la sicurezza. Durante il trattamento si crea un riscaldamento controllato che agisce su diversi target con risultati apprezzabili fin dalle prime sedute. Il manipolo PLUS massimizza gli effetti del trattamento di Onda, all'interno della stessa seduta, permettendo di effettuare un massaggio drenante post trattamento.

COOLWAVES®

3
TRATTAMENTI
IN 1

MANIPOLO
PLUS





Antenne telescopiche con sistema di assorbimento del peso del manipolo

Manipolo Plus per massaggio drenante

Display capacitivo touch screen richiudibile

Luci led multicolore ed avvisatore acustico per guidare l'operatore nel corretto utilizzo

Manipolo SHALLOW per area del sottointento, cellulite e skin tightening

Raffreddamento a contatto (5°C) per proteggere l'epidermide

COOLWAVES®

Manipolo DEEP per i trattamenti delle adiposità localizzate

I manipoli intelligenti

I due manipoli "Deep" e "Shallow" trasferiscono le Coolwaves® in diverse profondità per una modulazione e un adattamento perfetto al paziente, al tipo di trattamento e alla zona da trattare.

Il manipolo DEEP è indicato per le adiposità localizzate ed il manipolo SHALLOW per la cellulite ed il rilassamento cutaneo.

Il PLUS per le Coolwaves®

Al termine del trattamento con le Coolwaves®, in pochi minuti, si esegue con il manipolo PLUS un massaggio drenante secondo una procedura semplice e standardizzata. Il flusso d'aria emesso dal manipolo genera una serie di onde che si propagano sull'area interessata e ne riattivano il micro-circolo superficiale, accelerando così il naturale deflusso dei liquidi organici.

Il manipolo PLUS è infatti in grado di esercitare una pressione ottimale su cute, sottocute e tessuto adiposo, per risultati impossibili da raggiungere con un trattamento manuale, del quale è conservata tuttavia la piacevolezza e la sensazione di calore generato dai 6 led che si trovano all'interno del manipolo.



MANIPOLO PLUS
per massaggio drenante



MANIPOLO DEEP
per adiposità localizzate



MANIPOLO SHALLOW
per cellulite, lassità cutanea e sottointento

Riferimenti bibliografici:

Non-Invasive System Delivering Microwaves Energy for Unwanted Fat Reduction and Submental Skin Tightening: Clinical Evidence. *J Cosmet Dermatol.* 2022 Jul 1. Dr.ssa B. Salsi et al.

Effects of microwave technology on the subcutaneous abdominal fat and anthropometric indices of overweight adults: A clinical trial. *JCD* 2022; N. Pahlavani et al.

Microwave Therapy for Cellulite: An Effective Non-Invasive Treatment. *Clin Med.* 2022 Jan 20;11(3):515. doi: 10.3390/jcm11030515. PMID: 35159968; PMCID: PMC8836637. Prof. K. Hoffmann et al.

A New Protocol to Treat Abdominal Subcutaneous Fat Combining Microwaves and Flat magnetic stimulation. *Bioengineering* 2022, 9(5), 182. Prof. S. Nisticò et al

Combined Microwaves and Fractional Microablative CO₂ Laser Treatment for Postpartum Abdominal Laxity. *J Cosmet Dermatol.* 2021 Jan;20(1):124-131. doi: 10.1111/jocd.13510. Epub 2020 Jun 18. PMID: 32463169. Prof. P. Bonan et al.

Remodeling of Collagen Constituting Interlobular Septa of Subcutaneous Adipose Tissue Following Microwaves Application. *Dermatol Ther.* 2020 May;33(3):e13362. doi: 10.1111/dth.13362. Epub 2020 Apr 8. PMID: 32239616. Prof. N. Zerbinati et al.

Microwaves in Body Sculpting: A Prospective Study. *Dermatol Ther.* 2019 Mar;32(2):e12782. doi: 10.1111/dth.12782. Epub 2019 Jan 17. PMID: 30457194. Prof. P. Bonan et al.



TECNOLOGIA USER FRIENDLY

Onda PLUS, tramite la "GUI" (Graphical User Interface) comunica al sistema i dati del paziente, quali sesso, tipo di inestetismo, zona da trattare e severità dell'inestetismo restituendo i parametri di utilizzo individuati e suggeriti dal protocollo di trattamento.

Il professionista dovrà semplicemente trattare l'area con movimenti lineari o circolari. L'ergonomia e il design di Onda PLUS ben si adattano alle specifiche esigenze del professionista e ai moderni studi medici. **Il manipolo PLUS che è stato sviluppato sull'esperienza accumulata negli anni con Onda, conclude un trattamento piacevole, amplificandone l'efficacia.**

THERMAL VIEWER


L'opzionale Thermal Viewer permette di monitorare la distribuzione del calore sull'area trattata attraverso l'analisi della termocamera. Questa trasmette i dati al relativo software tramite tablet e l'intero kit è installato su uno stativo dedicato. L'operatore, attraverso la rappresentazione con diversi colori dell'area trattata, può analizzare le zone trattate e valutarne l'uniformità della distribuzione delle coolwaves.



TRATTAMENTI



Cellulite

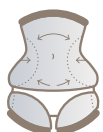

Adiposità Localizzate



Lassità

Onda PLUS è indicato per il trattamento di cellulite (P.E.F.S.), adiposità localizzate (body shaping) e lassità (tightening). Oltre ai trattamenti corpo, è possibile intervenire su adiposità e lassità del sottomento.

Il successo è nelle tue mani

Onda Plus è l'alleato ideale in un mercato in continua evoluzione e permette di distinguersi tra le numerose proposte di tecnologie e soluzioni per il rimodellamento corporeo. Con le Coolwaves® si otterranno risultati tangibili, lavorando in modo selettivo e distribuendo l'energia nella giusta profondità della zona da trattare, agendo efficacemente su 3 diverse problematiche. Le richieste di trattamenti non invasivi troveranno la risposta efficace, con risultati paragonabili a quelli derivanti da trattamenti invasivi e dolorosi.



“ La domanda di trattamenti non invasivi per il corpo è in forte aumento. Per soddisfare queste richieste utilizzo diverse tecnologie, ma è Onda Plus che mi permette di trattare cellulite, adiposità localizzate e lassità in modo diretto e soprattutto selettivo e profondo. Le Coolwaves® infatti a differenza delle altre tecnologie agiscono molto più in profondità e riducono in modo significativo l'inetetismo trattato, ridando elasticità al tessuto cutaneo.

Con il manipolo PLUS, si massimizzano i risultati ottenibili con le Coolwaves®, andando ad agire sul microcircolo e permettendo il drenaggio dei

liquidi che si smuovono durante il trattamento. Il manipolo PLUS ha un effetto drenante e migliorativo sulla ritenzione idrica superficiale e quindi sull'effetto a buccia d'arancia.

Ne consegue un miglioramento del derma, ripulito dalle tossine accumulate, visibile fin da subito sul tono e sul colore cutaneo.

Il trattamento con il manipolo PLUS è infine molto apprezzato dai pazienti, offrendo loro un'esperienza piacevole e un risultato visibile.”

Dr.ssa Cristina Cuciti
Dermatologa, Arezzo, Italia

RISULTATI PRE-POST



Prima




Dopo

LASSITÀ

Per gentile concessione del Dr. Francesco Asta, Comiso (RG)



Prima

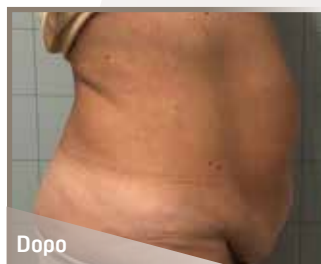

Dopo

ADIPOSITÀ E LASSITÀ

Per gentile concessione della Dr.ssa Maria Teresa Saliani, Modugno (BA)



Prima



Dopo

LASSITÀ

Per gentile concessione del Dr. Giovanni Turra, Rudiano (BS)



Prima




Dopo

LASSITÀ

Per gentile concessione della Dr.ssa Cinzia Incandela, Palermo



Prima

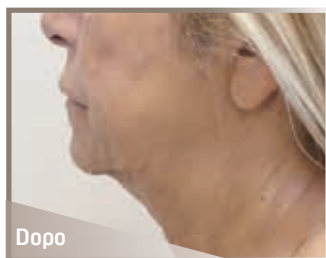

Dopo

LASSITÀ SOTTOMENTO

Per gentile concessione del Dr. Giovanni Turra, Rudiano (BS)



Prima



Dopo

LASSITÀ SOTTOMENTO

Per gentile concessione della Dr.ssa Cristina Cuciti, Arezzo



Prima



Dopo

LASSITÀ

Per gentile concessione della Dr.ssa Benedetta Salsi, Reggio Emilia



Prima



Dopo

CELLULITE

Per gentile concessione della Dr.ssa Benedetta Salsi, Reggio Emilia




Prima



Dopo

ADIPOSITÀ E CELLULITE

Per gentile concessione della Dr.ssa Cristina Cuciti, Arezzo

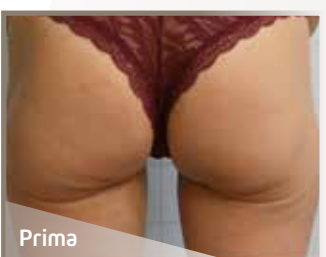

Prima



Dopo

LASSITÀ

Per gentile concessione del Dr. Giovanni Turra, Rudiano (BS)

SPECIFICHE TECNICHE

Onda PLUS	
Sorgente	Microonde - Coolwaves®
Potenza (Max)	200 W
Frequenza	2,45 Ghz
Raffreddamento del manipolo	Raffreddamento brevettato integrato
Manipoli Coolwaves®	Deep: ø 6,6 cm Shallow: ø 5,6 cm
Manipolo PLUS	Massaggio ritmico
Controllo emissione	Pulsante sul manipolo
Interfaccia utente	Display Touch Screen a colori da 10,4" (reclinabile)
Database	Integrato con tutorial per la guida al trattamento
Dimensione (cm)	40x110x70 (senza antenna)
Peso	60 Kg
Assorbimento elettrico	100-240 Vac, 50-60 Hz; 1500 VA

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.



Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.**, **Quanta System** ed **Asclepion Laser Technologies** tre aziende appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

Seguici su



www.renaissancelaser.it



Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com



Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso. Riservato ai professionisti sanitari.

