

Tecnologia innovativa
per la medicina estetica

PURA

Per una pelle **PERFETTA**



PURA

La tecnologia che libera la pelle dalle impurità

PURA è il sistema di skincare che, grazie ai trattamenti **Diamond Peeling, Aqua Therapy** e al manipolo **Multitype EP** per il trattamento di elettroporazione, esfolia, deterge, purifica, idrata e fa penetrare all'interno della pelle, in particolare quella del viso, speciali sostanze nutritive, rendendo la cute levigata e libera dalle impurità.

•• Device multifunzione

- ▶ **Tre tecnologie in un unico sistema: Diamond Peeling, Aqua Therapy, e Multitype EP** per l'elettroporazione. Aree di trattamento: volto, décolleté e altre zone del corpo.



Soluzione
1

Rimozione più profonda del sebo e residuo ossidato nei pori tramite l'uso di acido lattico



Soluzione
2

Elimina le cellule morte ossidate e riduce il sebo, le irritazioni e altre imperfezioni della pelle grazie all'uso dell'acido salicilico



Soluzione
3

Idrata e nutre la pelle con l'uso di estratto di Portulaca Oleracea



Soluzione
4

Disinfetta e pulisce il dispositivo PURA grazie al suo contenuto di etanolo



Rimozione delle impurità



Utilizzo di diverse soluzioni



Pulizia della pelle

1 Diamond Peeling - Manipolo Diamond



Il trattamento Diamond Peeling rimuove le cellule morte e le impurità, rendendo la pelle più liscia e tonica. Il manipolo **Diamond** è dotato di tre tip per diversi tipi di pelle e aree di applicazione.



ES-10

ES-20


ES-30

2 Aqua Therapy - Manipolo Aqua



Il manipolo Aqua, dotato di una tip radiale, è impiegato per il trattamento Aqua Therapy

La soluzione viene rilasciata dall'ugello del manipolo Aqua posto al centro della tip e si propaga verso l'esterno attraverso i raggi presenti. L'effetto vacuum ottenuto tramite i raggi aspira ed elimina le impurità rimosse.

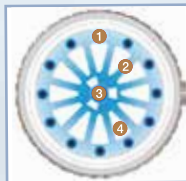

- 1 Valvola di espulsione
- 2 Raggi distribuzione soluzione
- 3 Emissione della soluzione
- 4 Area trattata


- Vacuum regolabile fino a 5 livelli
- Velocità di flusso fino a 3 livelli

3 Elettroporazione - Manipolo Multitype EP



- Penetrazione efficace della soluzione per ringiovanimento e nutrimento della pelle
- 3 luci al LED ● Luce rossa: stimolazione anti-age ● Luce blu: effetto antinfiammatorio/anti acne ● Luce viola: combinazione dei due effetti rosso e blu

La procedura di elettroporazione, grazie al manipolo **Multitype EP**, permette a sostanze con un determinato peso molecolare di penetrare all'interno della membrana cellulare. L'elettroporazione attraversa il doppio strato di fosfolipidi per aprire dei canali sulla superficie della pelle, attraverso i quali viene veicolata la soluzione. I canali precedentemente aperti vengono chiusi quando l'elettroporazione si è conclusa.

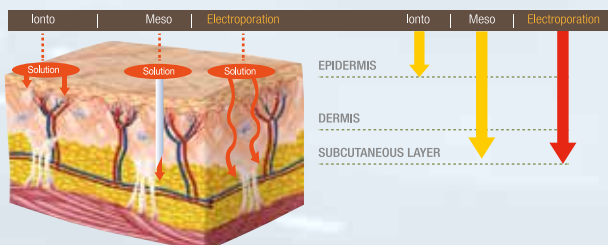

- Elettroporazione regolabile fino a 10 livelli

SPECIFICHE

Applicatori	Aqua Elettroporazione Microdermoabrasione
Potenza d'ingresso	100-132V / 200-240 V~ 50/60 Hz
Pannello	7 Pollici
Peso	45 Kg
Dimensioni	(LxPxAmm): 344x 435 x 1060

 **RENAISSANCE**[®]
The laser excellence

www.renaissancelaser.it



Importatore/Distributore
esclusivo per l'Italia

DEKA
Innate Ability

DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884
dekaitalia@deka.it - www.dekalaser.com

 **Eunsung** | 

120, Gieopdosi-ro, Jijeong-myeon, Wonju-si, Gangwon-do, Republic of Korea.

Tel : +82-2-514-9713(Rep) Fax: +82-2-514-9716 Email : es@esglobal.co.kr / www.esglobal.co.kr