

DEKA
Innate Ability

IL NUOVO PRO SYSTEM



MOTUS
PRO

Efficacia e sicurezza nei trattamenti di medicina estetica

Prestazioni ineguagliabili nei trattamenti
di epilazione medicale e vascolari



MOTUS PRO

L'EVOLUZIONE DELL' ECCELLENZA

EPILAZIONE

TRATTAMENTI VASCOLARI

LESIONI PIGMENTATE
BENIGNE

RINGIOVANIMENTO
CUTANEO
NON ABLATIVO

PSEUDOFOLLICOLITE
DELLA BARBA (PFB)

ONICOMICOSI

TRATTAMENTO COMPLETO
DEL VOLTO (MOVEO GLO)



L'evoluzione della tecnologia laser con doppia lunghezza d'onda

Oggi la famiglia MOTUS by DEKA dà il benvenuto a MOTUS PRO: una nuova piattaforma laser a due lunghezze d'onda complementari (Alessandrite 755 nm + 1064 Nd:YAG), rinnovata nello stile e nelle prestazioni, in grado di garantire livelli di potenza maggiori, trattamenti più rapidi, con un'ampia gamma di manipoli con diversi spot size e impulsi specifici che rendono questa piattaforma una delle più avanzate e flessibili nel campo della dermatologia e della medicina estetica.

Perché scegliere MOTUS PRO:

Elevata
potenza
di picco
2-3 ms

Veloce, sicuro e confortevole


La durata del trattamento è ridotta del 50% grazie a prestazioni ottimizzate, a una maggiore dimensione dello spot (fino a 24 mm) e a una maggiore potenza di picco. Il nuovo sistema di raffreddamento nel manipolo (con un incremento del 40% della capacità refrigerante) aumenta in modo concreto la sicurezza, diminuisce la percezione del fastidio e i possibili effetti collaterali.

Tecnologia consolidata ed esclusiva con MOVEO

MOTUS PRO è equipaggiato con 12 manipoli standard e 4 manipoli Moveo che consentono di effettuare trattamenti su diversi target, fototipi e aree del corpo in modo efficace e con il massimo confort.

Epilazione medica senza compromessi

MOTUS PRO non tratta solo i peli scuri, ma grazie agli impulsi brevi interagisce efficacemente anche con i peli più chiari e sottili, anche nelle aree più delicate.

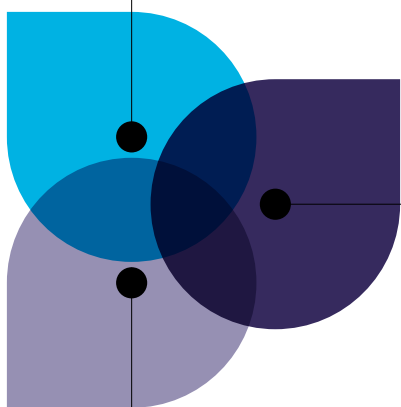

MOTUS PRO

LA SCIENZA ALLA BASE

Due lunghezze d'onda al servizio del professionista

MOTUS PRO introduce un sistema a doppia lunghezza d'onda efficace ed estremamente flessibile, in grado di fornire trattamenti affidabili e sicuri per **tutti i tipi di peli** (anche i più chiari e sottili) **e fototipi** (anche quelli più scuri).

Motus PRO rende l'epilazione con Alessandrite efficace e indolore.

La sorgente Nd:YAG amplia il campo d'azione del sistema laser ai trattamenti vascolari, come capillari o teleangectasie ed ai trattamenti di fotoringiovanimento.

- 12 Manipoli standard
- Ampia gamma di spot size (2,5 - 24 mm)
- 4 manipoli Moveo
- Connettore ergonomico per collegamento di dispositivi di raffreddamento esterni
- Sistema di riconoscimento automatico dei manipoli

Spot da
24 mm



IL TOP ANCHE PER I TRATTAMENTI VASCOLARI

MOTUS PRO introduce un impulso ottimizzato per i trattamenti vascolari che massimizza l'efficacia riducendo drasticamente il fastidio legato all'interazione del laser con il target.

LA SCIENZA ALLA BASE

L'innovativa tecnologia MOVEO

Questa tecnologia viene esaltata dalla tecnica "in-motion", erogando la corretta dose di energia in modo efficace ed efficiente perchè agisce in diretto contatto con la cute e a basse fluenze. Il sistema di raffreddamento con zaffiro garantisce un elevatissimo standard di sicurezza. Questa tecnologia esclusiva di DEKA è adatta per 4 tipologie di applicazioni.

moveo **HR**

Hair removal

Il manipolo Moveo HR utilizza la tecnica "Multipass" e fluenze ridotte su aree delimitate per ottenere un incremento graduale del riscaldamento dei follicoli piliferi fino al raggiungimento dell'end-point in modo sicuro ed efficace.

moveo **PL**

Pigmented lesions

Tramite il riscaldamento progressivo della lentigo, viene ridotto al minimo il rischio di iperpigmentazioni o ipopigmentazioni post trattamento.

moveo **SR**

Skin rejuvenation

Con la tecnica multipass applicata a questo manipolo si ottiene il riscaldamento del derma e la promozione della neocollagenogenesi.

moveo **VL**

Vascular Lesions

È stato realizzato per il trattamento del rossore superficiale.

moveo **PL** + **SR** + **VL** = moveo**Glo**

Direttamente dagli USA, con il trattamento **Moveo Glo**, vengono trattate lesioni vascolari e pigmentate, stimolando il collagene in un'unica seduta, con il confort della tecnologia **Moveo**.



LA PERFETTA COMBINAZIONE

I punti di forza di MOTUS PRO

- **Tecnologia laser ad alta potenza**
Flessibilità con un'ampia gamma di dimensioni di spot, fluenze ed elevata velocità di ripetizione per trattamenti efficaci e veloci.
- Adatto per trattamenti su **pelli chiare, scure o abbronzate**.
- **Trattamenti veloci, sicuri e indolore** utilizzando i manipoli Moveo.
- **Easy Switch tra le due lunghezze d'onda**
e possibilità di effettuare trattamenti diversi in una singola sessione.
- **Know-How a portata di mano** con un database di protocolli incorporato per tutti i tipi di peli, fototipi e trattamenti.
- **Basso costo di manutenzione**.



Solo per gli utenti DEKA:

un ottimo supporto nella pratica medica

DEKA Club

Estensione del raccordo per collegamento
a sistemi di raffreddamento esterni

4 manipoli con tecnologia Moveo

Nuova interfaccia
grafica utente

• **12 manipoli**
Laser con spot
fino a 24 mm

• **Raffreddamento
integrato**

Sorgente Laser **Alessandrite 755 nm**
Sorgente Laser **Nd:YAG 1064 nm**



Specifiche tecniche

MOTUS PRO	MOTUS AX PRO	MOTUS Y PRO	MOTUS AY PRO
Tipo di laser	Alessandrite 755 nm	1064 Nd:YAG	Alessandrite 755 nm e Nd:YAG
Energia per impulso	52 J (max)	63 J (max)	52 J (MAX per Alex) e 63 J (MAX per Nd:YAG)
Durata dell'impulso	0.2 – 300 ms		
Velocità di ripetizione	Fino a 12 Hz		
Dimensioni spot (opzionale)	Da 2,5 mm a 24 mm, HR e PL	Da 2,5 mm a 24 mm, HR e VL	Da 2,5 mm a 24 mm, HR, VL, PL e SR
Fluenza	Fino a 600 J/cm ²		
Dimensioni e peso	114 (H) cm x 45 (W) cm x 94 (D) cm 100 kg		
Requisiti elettrici	<16A @230 Vac		

PERICOLO - Radiazioni laser visibili e invisibili. Evitare l'esposizione degli occhi o della pelle alle radiazioni dirette o disperse. Prodotto laser di Classe 4.

Questa brochure non è destinata al mercato statunitense.



Seguici su



www.dekalaser.com



DEKA M.E.L.A. s.r.l.

Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italy
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

DEKA Innate Ability

DEKA, spin-off del Gruppo ELEn. è leader mondiale nella progettazione e produzione di laser e sorgenti luminose per applicazioni in campo medicale. DEKA commercializza i suoi dispositivi in più di 120 paesi attraverso una vasta rete di distributori internazionali e uffici diretti in Italia, Francia, Giappone e Stati Uniti. L'eccellenza è il segno distintivo dell'esperienza e dei riconoscimenti di DEKA raccolti nell'ambito della Ricerca e Sviluppo in oltre trent'anni di attività. Qualità, innovazione ed eccellenza tecnologica collocano DEKA ed i suoi prodotti in una posizione unica e distinta nello scenario globale. DEKA produce dispositivi laser in conformità alle specifiche della Direttiva 93/42/CEE e il suo sistema di garanzia della qualità è conforme alle norme ISO 9001 e ISO 13485.