

BODYLAB

Il sistema per la tonificazione
muscolare e la riabilitazione



BodyLab




Il benessere che nasce dalla forma fisica

BodyLab è il nuovo sistema sviluppato da **DEKA** per la stimolazione muscolare, con aumento del metabolismo ed il miglioramento della postura.

Attraverso il rimodellamento di volume e forma si attiva un processo di allenamento per il trattamento dell'ipotonìa muscolare.

BodyLab è il dispositivo non invasivo che agisce su diverse aree corporee con i suoi manipoli ergonomici, che ben si adattano ad addome, glutei, braccia e gambe.

- Selettività neuromuscolare
- Tonificazione muscolare
- Miglioramento della postura
- Non-sollecitazione delle articolazioni

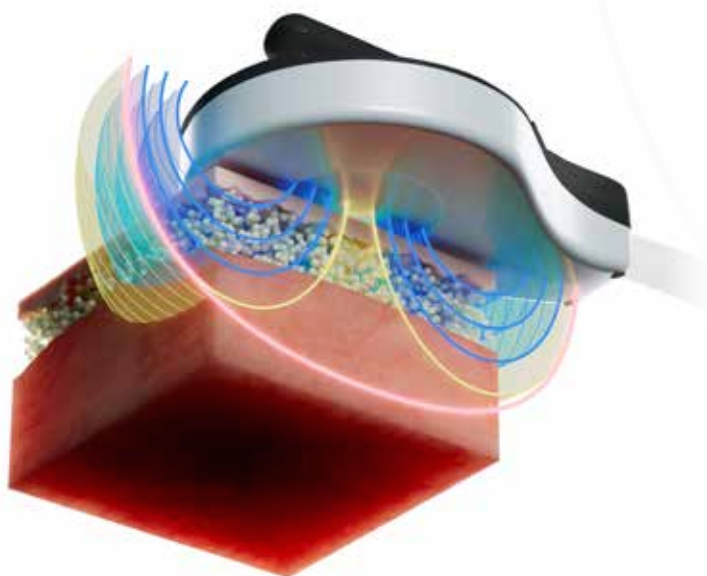



Programmi
preimpostati e
personalizzabili

Manipoli
Ergonomici

Non operatore
dipendente

Tecnologia
user-friendly

La tecnologia innovativa dei manipoli

I manipoli di BodyLab, raffreddati a liquido, assicurano al sistema prestazioni di alto livello per un'esperienza di trattamento sicura ed efficace.

- **FORMA ERGONOMICA**
- **FACILI DA UTILIZZARE**
- **LEGGERI**
- **DERMA TRASPARENTE ALLA
STIMOLAZIONE MAGNETICA**



Programmi di allenamento personalizzabili

BodyLab si adatta alle caratteristiche del paziente per un percorso terapeutico che si differenzia in base a soggetti:

Sedentari: massa muscolare ridotta;

Moderati: massa muscolare normale;

Sportivi: massa muscolare sviluppata.

I protocolli di trattamento di BodyLab sono:

Aerobic: Protocollo per il risveglio muscolare.

Shaping: Lavoro finalizzato al recupero del trofismo e del tono muscolare.

Strength: Lavoro volto a favorire un allenamento intenso.

Ogni protocollo è composto da 2 moduli di intensità crescente, da eseguire in successione:

1 - principiante: da applicare al trattamento iniziale;

2 - avanzato: da applicare quando il trattamento è ben tollerato dai soggetti.

TRATTAMENTI



Tono e Trofismo
Muscolare

NON
INVASIVO

NON
OPERATORE
DIPENDENTE

ADATTO
A PIÙ AREE
CORPOREE



Aree di applicazione



Ogni area del corpo trattabile con BodyLab contribuisce al percorso di allenamento ed una sensazione di benessere.




Il successo è nelle tue mani

La non invasività di BodyLab permette di rispondere a trend in continua crescita: allenamento muscolare e un percorso di benessere che vada dal risveglio al potenziamento muscolare.



Il dispositivo non operatore dipendente è la soluzione per il centro medico che accompagna il paziente verso risultati progressivi e duraturi.





RISULTATI PRE-POST

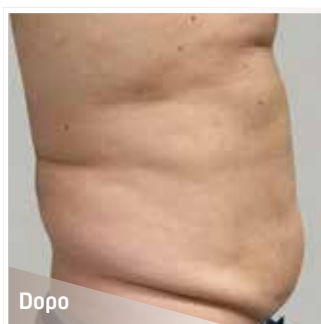



Per gentile concessione della Dr.ssa C. Cuciti, Arezzo.

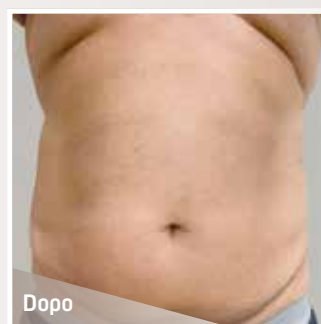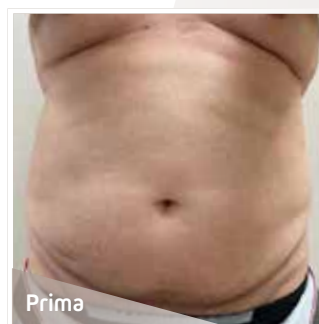

Per gentile concessione della Dr.ssa C. Cuciti, Arezzo.

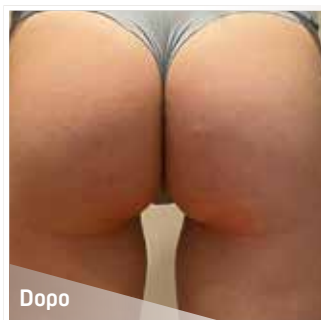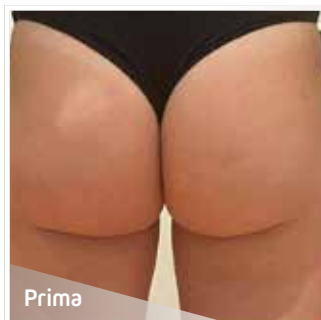

Per gentile concessione della Dr.ssa F. Negosanti, Bologna.

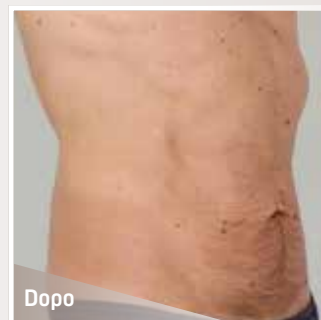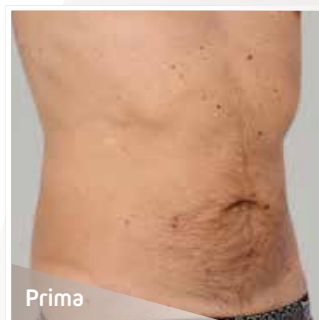

Per gentile concessione del Prof. P. Bonan, Firenze.

SPECIFICHE TECNICHE

BODYLAB	
Tecnologia	Campi elettromagnetici
Intensità	Fino a 2,5 T
Frequenza	Da 1 Hz a 150 Hz
Durata dell'impulso	250 μ s $\pm$ 20%
Display	LCD da 10,4" con touchscreen
Dimensioni e Peso	34 cm x 90 cm x 67 cm (LxPxA) - 60 Kg



Renaissance nasce dalla ferrea volontà di unire sotto un solo marchio soluzioni veramente uniche per la dermatologia, la chirurgia e la medicina estetica, maturate dall'esperienza trentennale di **Deka M.E.L.A.**, **Quanta System** ed **Asclepion Laser Technologies** tre aziende appartenenti ad un grande gruppo, la **El.En. SpA** di Calenzano (Firenze). Renaissance è l'espressione massima delle tecnologie medicali di El.En., che si posiziona tra le prime imprese al mondo nel settore laser per la medicina, il body shaping e la chirurgia.

Seguici su



www.renaissancelaser.it



Deka M.E.L.A. S.r.l.
dekaitalia@deka.it
www.dekalaser.com



Via Baldanzese, 17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

Al fine di migliorare i propri prodotti l'azienda si riserva di modificarne le caratteristiche tecniche senza preavviso. Riservato ai professionisti sanitari.

